

FlashMax P4 Ortho LED Lampa polimeryzacyjna

NAJMOCNIEJSZA NA ŚWIECIE
LAMPY POLIMERYZACYJNE

DWA RODZAJE ŚWIATŁA
UTWARDZAJĄCEGO:
O DUŻYM I O MAŁYM NATEŻENIU

FLASHMAX P4 ZOSTAŁA
ZAPROJEKTOWANA NA NOWO
WRAZ Z DOPRACOWANYMI
WEWNĘTRZNYMI
ELEMENTAMI KONTROLNYMI
ORAZ ZAPROGRAMOWANA Z MYŚLĄ
O WIĘKSZEJ NIEZAWODNOŚCI
I PRODUKTYWNOŚCI



FlashMax P4
Ortho Pro Light Pen

ORTO-FAN®

ul. Jagiellońska 66 | 03-468 Warszawa
tel. 22 818 53 87 | 22 818 97 99 | 22 618 30 50
sprzedaz@ortofan.pl | www.ortofan.pl

 @NowoczesnaOrtodoncja

RMO®
rocky mountain orthodontics

FlashMax P4

Ortho Pro Light Pen



Wygodny uchwyt typu długopisowego

Ekonomiczna jednostka wytwarza mniej ciepła podczas obsługi, bez wpływu na moc i wydajność.

Łatwa obsługa dzięki obustronnym przyciskom

Obustronne przyciski kontrolne umożliwiają pracę z maksymalną wydajnością na górnym i dolnym łuku zębowym. Identyczne przyciski kontrolne po każdej stronie umożliwiają obracanie lampy, aby osiągnąć najlepszy kąt dla maksymalnej siły wiązania.

Bezprzewodowy komfort

Zapewnia maksymalną elastyczność w trakcie pracy: przemieszczanie z fotela na fotel lub pomiędzy gabinetami.

Największa moc wyjściowa na świecie!

Umożliwia pracę przez cały dzień bez konieczności ładowania. Najwyższa moc wyjściowa z natężeniem światła spośród lamp do polimeryzacji z diodami LED:

FlashMax P4 Ortho PRO

Maksymalne natężenie 6,000 mW/cm²

Tryby utwardzania 1s/3s

Regulowana końcówka

Końcówka z lampą podlega regulacji o $\pm 15^\circ$ dla lepszego dostępu do dystalnych regionów jamy ustnej; końcówka z lampą w rozmiarze 8 mm jest idealna do stosowania w przypadku aparatów stałych.

Większa niezawodność dzięki ulepszonemu sterowaniu wewnętrznemu i programowaniu.

Źródło zasilania

Moc wejściowa 100-240VAC, 50/60Hz
Moc wyjściowa 5VDC, 1.0A

Bateria


Napięcie znamionowe 3.2 V
Pojemność znamionowa 1200 mA
Rodzaj baterii LiFePO4
Czas ładowania 2.5 godziny

Waga

Wymiary 120g
L 225 mm, D 25 mm



FlashMax P4 dysponuje trzema programami:

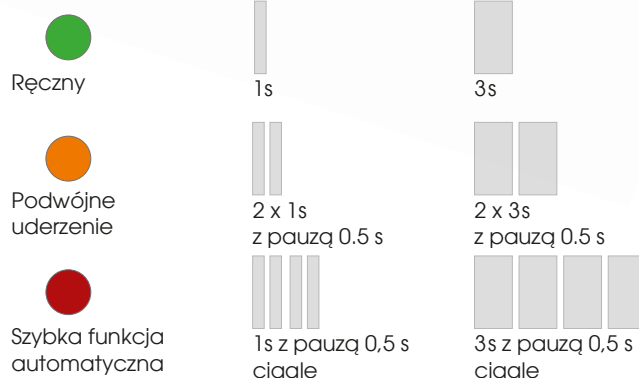

Ciągły tryb polimeryzacji: 3 sekundy lub 5 sekund z pauzą 0,5 sekundy jest idealny do wiązania bezpośredniego lub pośredniego.

Numery części FlashMax P4 Light Pen

J02130 FLASHMAX P4 ORTHO PRO		
Akcesoria		Liczba
J02121	FLASHMAX P4 LIGHT PEN KOŃCÓWKI 4MM	50
J02122	FLASHMAX P4 LIGHT PEN KOŃCÓWKI 8MM	50
J02123	FLASHMAX P4 LIGHT PEN OSŁONY	10
J02124	FLASHMAX P4 LIGHT PEN EKRAN	1
J02125	FLASHMAX P4 JEDNORAZOWE EKRANY ŚWIETLNE	50

Osłony są przeznaczone do jednorazowego użytku i są dostępne w torebkach po 10 sztuk. Końcówki można z łatwością zakładać i zdejmować z charakterystycznym kliknięciem, można je regulować w zakresie 30 stopni dla optymalnego dostępu. Możliwość wyboru końcówki w rozmiarze 4 lub 8 mm.



ORTO-FAN®

ul. Jagiellońska 66 | 03-468 Warszawa
tel. 22 818 53 87 | 22 818 97 99 | 22 618 30 50
sprzedaz@ortofan.pl | www.ortofan.pl

@NowoczesnaOrtodoncja

RMO®
rocky mountain orthodontics